

HI 98163


제품 포장을 벗긴 후, 운송 중 손상이 발생했는지 점검하고 손상 부분이 발견되었을 때에는 판매자에게 바로 연락한다.

- FC2323 pH 프로브
- HI700630 산성 세척 용액
- HI92000 PC 소프트웨어
- HI920015 USB 케이블
- pH 4.01&7.01 버퍼 용액(각 230mL)
- 100mL 비커(2개)
- 1.5V AA 배터리(4개)
- 케이스
- 품질보증서

제품설명


앞면 모습

- 1) LCD 화면
- 2) 기능키
- 3) 방향키
- 3) **ON/OFF** 키
- 5) **Light** 화면 불빛 기능키
- 6) **GLP**키
- 7) **CAL**키 보정모드
- 8) **SETUP** 설정 키
- 9) **RCL**키 로그 데이터 확인 시
- 10) **MODE** 모드 키
pH와 mV 측정 모드 전환
- 11) **RANGE** pH와 mV 측정 범위 바꿀 때
- 12) **HELP** 도움말키
- 13) **ESC** 현재 화면에서 벗어날 때

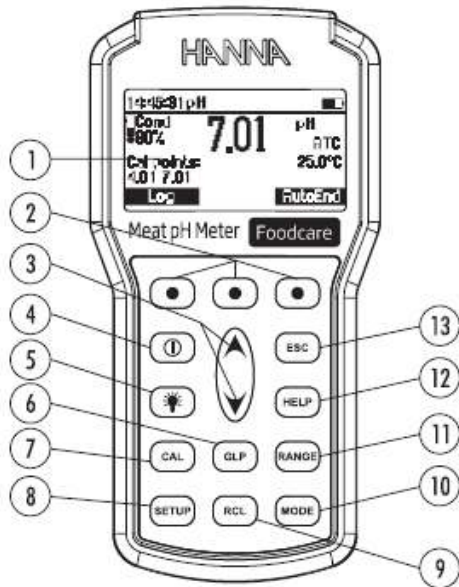

뒷면 모습


- 14) 전극 **DIN** 연결 부분
- 15) USB 연결 부분

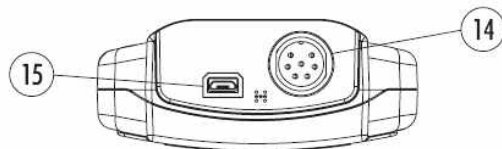

이 제품은 1.5V AA(4개)의 배터리와 제공됩니다. 미터기 안에 배터리를 넣어주세요. 컴퓨터와 연결하지 않을 때, 방수를 위해서 반드시 마이크로 USB 커버를 사용하세요. 이 제품은 DIN 연결 부분을 이용해 전극과 연결됩니다. ON/OFF키를 사용해서 제품을 켜주세요. 제품을 켜면 처음에 한나 기계의 로고와 배터리 잔량 표시 뒤 측정 모드에 들어갑니다. 측정 이후 제품을 끄고, 전극을 청소한 뒤 몇 방울의 보존 용액(HI 70300)과 함께 보호캡을 씌운 뒤 보관합니다. 자동 전원 꺼짐 기능은 기기를 사용하지 않고 기기의 설정 시간(최초설정 30분)이 지나면 배터리를 절약하기 위해 자동으로 종료합니다. 자동 화면 불빛 꺼짐 기능은 일정 시간(최초설정 1분) 기기를 사용하지 않으면 자동으로 화면이 꺼지는 기능입니다.

pH 측정

pH를 측정하기 위해서 전극 보호캡을 벗기고 샘플에 4cm정도 전극 끝을 담고 측정한다.

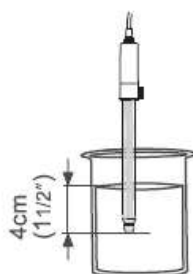

RANGE키를 눌러 pH와 mV 둘 중 선택한다.

MODE키를 사용해 pH결과를 선택한다.

전극이 결과를 안정시키기 위한 시간이 필요하다.(모래시계 표시가 끝날 때까지)



pH화면이 표시된다.

- 선택된 용액을 이용한 ph 측정
- 선택된 기계를 이용한 온도 측정(°F또는°C)
- 보정동안 전극 상태
- 마지막으로 사용한 ph 보정 버퍼(SETUP에서 끌 수 있음)
- 배터리 잔량 표시
- 이용 가능한 기능키

정확한 pH측정을 위해서 기기를 보정해야한다. 전극은 샘플을 측정하기 전에 측정 샘플로 한번 행구고, 축축하게 보관한다.

ph 측정은 온도에 직접적으로 영향을 받는다. 정확한 pH측정을 위해서 온도를 고려해야한다. 만약 샘플 온도가 전극과 다르다면, 같은 온도가 될 때까지 몇 분정도 기다린다.

온도 측정

온도 측정 센서는 DIN 소켓에 연결되어 있다.

참고 : 온도는 섭씨(°C)와 화씨(°F)로 표시될 수 있다.(SETUP에서 설정가능)

화면 불빛 기능

이 기기는 LIGHT 키를 이용해서 쉽게 켜다 켜 수 있는 화면 불빛 기능을 제공한다.

참고 : 화면 불빛은 설정된 시간동안 사용을 하지 않으면, 자동적으로 꺼진다.

높은 정확도를 필요로 할 때 특히 기기를 자주 보정하는 것을 추천한다.

pH범위는 다음과 같을 때 반드시 다시 보정해야 한다.

- 전극 교체 시
- 최소 일주일에 한번
- 강한 약품 측정 이후
- 보정 알람이 만료되었을 때 (CAL DUE가 깜박일 때, 이 기능은 SETUP에서 끌 수 있음)
- 만약 pH측정 시 Outside Cal Range 메시지가 깜박일 때
(측정 범위가 현재의 보정으로 커버되지 않을 때, 이 기능은 SETUP에서 끌 수 있음)

이 기기는 7개의 기준 보정 설정(pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45)중 고를 수 있다. 5개의 사용자 설정 보정을 지정하여 사용할 수 있다. 사용자 설정 버퍼는 25°C에 맞춘다.

만약 보정 중 사용자 설정 보정이 선택되면, 커스텀 기능키가 화면에 표시된다. 커스텀 키를 눌러서 사용자 보정 변경 모드를 선택한다. 위아래 키를 눌러서 화면에 표시된 ±1.00 pH 값을 설정하고 온도를 읽힌 뒤 확인한다. 변경하지 않을 때는 ESC키를 눌러 나간다.


정확한 pH 측정을 위해서 여러 개의 포인트 보정을 권한다. 최소한 2개의 포인트 보정을 해야 한다.

이 기기는 자동적으로 보정 시에 사용된 버퍼와 보정된 버퍼근처 ±0.2pH 범위 내의 버퍼값을 건너뛴다.


- 보호캡을 제거하고 증류수나 탈 이온화된 물에 헹군다.
- 적은 양의 버퍼 용액을 깨끗한 비커에 붓는다. 정확한 측정을 위해서 두 개의 비커에 각각 용액을 사용하고, 첫 번째 용액에서 씻어내고 두 번째 용액에서 보정을 한다.

5-포인트 보정


- ◆ 전극을 사용자가 선택한 버퍼용액(1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 pH 또는 맞춤버퍼)에 약 4cm 정도 담그고 천천히 젖는다.
- ◆ CAL을 누른다. 기계에 측정된 pH값과 첫 번째 예상된 버퍼와 온도기록이 표시될 것이다.

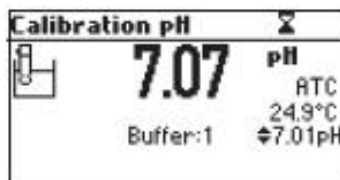


- ◆ 필요하다면 다른 버퍼값을 선택하도록 화살표 키를 누른다.
- ◆ 기록이 안정될 때까지 모래시계표시가 깜박일 것이다.
- ◆ 기록이 안정되고 선택된 버퍼와 가까우면 CFM 기능이 보일 것이다.

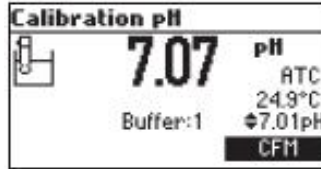


- ◆ 첫 번째 포인트를 확정하려면 CFM을 누른다.
- ◆ 보정된 값과 두 번째 예상된 버퍼 값이 LCD에 보일 것이다.

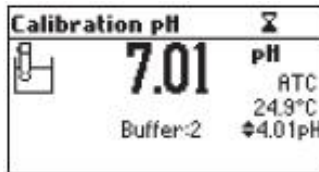


- ◆ 첫 번째 보정 포인트가 확정되면 pH프로브를 두 번째 버퍼용액에 4cm 정도 담그고 천천히 젖는다.
- ◆ 필요하다면 다른 버퍼값을 선택하도록 화살표키를 누른다.
- ◆ 기록이 안정될 때까지 모래시계표시가 깜박일 것이다.

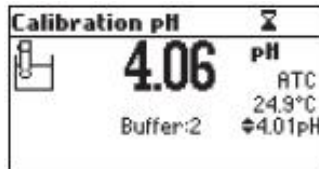


- ◆ 기록이 안정되고 선택된 버퍼와 가까우면 CFM 기능이 보일 것이다.

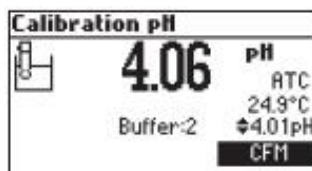

- ◆ 보정을 확정하려면 CFM을 누른다.
- ◆ 보정된 값과 세 번째 예상된 버퍼 값이 LCD에 보일 것이다.

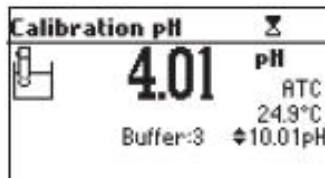


- ◆ 두 번째 보정포인트가 확정되면 pH 프로브를 세 번째 버퍼용액에 4cm 정도 담그고 천천히 젖는다.

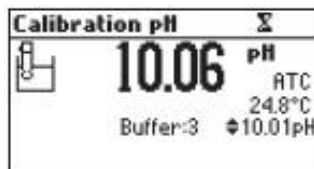


- ◆ 필요하다면 다른 버퍼값을 선택하도록 화살표키를 누른다.


- ◆ 기록이 안정될 때까지 모래시계표시가 깜박일 것이다.
- ◆ 기록이 안정되고 선택된 버퍼와 가까우면 CFM 기능이 보일 것이다.

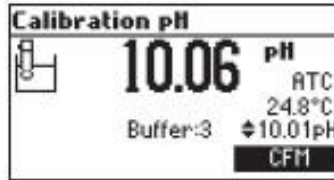


- ◆ 보정을 확정하려면 CFM을 누른다.
- ◆ 보정된 값과 네 번째 예상된 버퍼 값이 LCD에 보일 것이다.

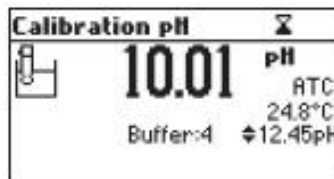


- ◆ 세 번째 보정 포인트가 확정되면 pH 프로브를 네 번째 버퍼용액에 4cm 정도 담그고 천천히 젖는다.
- ◆ 필요하다면 다른 버퍼값을 선택하도록 화살표 키를 누른다.
- ◆ 기록이 안정될 때까지 모래시계표시가 깜박일 것이다.

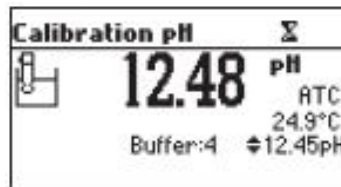


- ◆ 기록이 안정되고 선택된 버퍼와 가까우면 CFM 기능이 보일 것이다.

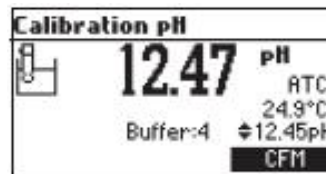


- ◆ 보정을 확정하려면 CFM을 누른다.

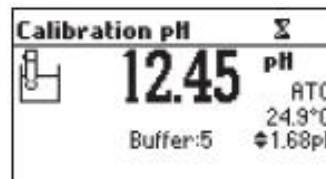

- ◆ 보정된 값과 다섯 번째 예상된 버퍼 값이 LCD에 보일 것이다.
- ◆ 네 번째 보정 포인트가 확정되면 pH 프로브를 다섯 번째 버퍼용액에 4cm 정도 담그고 천천히 젖는다.

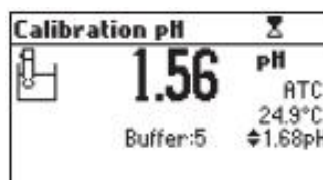

- ◆ 필요하다면 다른 버퍼값을 선택하도록 화살표 키를 누른다.
- ◆ 기록이 안정될 때까지 모래시계표시가 깜박일 것이다.

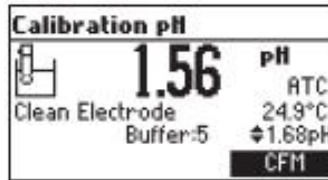

- ◆ 기록이 안정되고 선택된 버퍼와 가까우면 CFM 기능이 보일 것이다
- ◆ 보정을 확정하려면 CFM을 누른다.
- ◆ 기계는 보정 값을 저장하고 원래 측정모드로 돌아간다.

4포인트,3포인트 또는 2포인트 보정

- ◆ "5포인트 보정"부분에서 설명된 대로 진행한다.
- ◆ 적절하게 보정 포인트가 수락된 후에 CAL 또는 ESC를 누른다. 기계는 측정모드로 돌아갈 것이고 보정데이터를 저장할 것이다.

1-포인트 보정

1-포인트 보정을 위한 두 가지 선택 가능한 SETUP 옵션이 있다.


Replace & Offset.

- ◆ Replace 옵션이 선택되면 현재버퍼와 가장 낮고 가장 높은 버퍼들 사이에 슬롭이 다시 계산될 것이다.
- ◆ Offset 옵션이 선택되면 현재의 슬롭을 변경하지 않고 전극 오프셋 보정이 실행된다.

ERROR SCREENS

Wrong Buffer

보정을 확인할 수 없다.


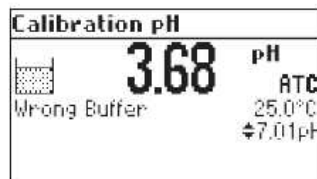


pH 기록은 선택된 버퍼와 가깝지 않다.

화살표 키를 사용하여 다른 버퍼를 선택하거나 버퍼를 변경한다.

전극 오염/파손 또는 버퍼 오염

보정을 확인할 수 없다.

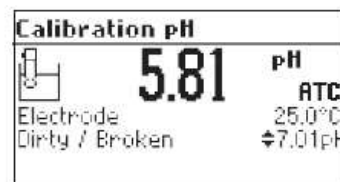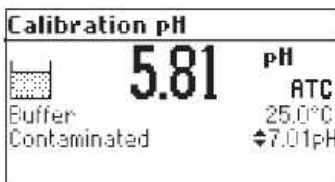


전극의 오프셋이 가능 범위 내에 있지 않다. 전극이 깨졌는지, 세척하였는지 확인한다. 버퍼


의 양을 확인한다. 만약 필요하다면 버퍼를 변경한다.

Wrong Slope

보정을 확인할 수 없다.

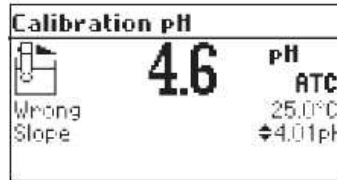


평가된 슬롭이 가장 낮은 수락값 보다도 낮다.(기본 슬롭의 80%)

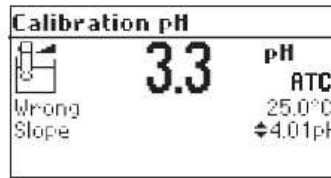

평가된 슬롭이 가장 높은 수락값 보다도 높다.(기본 슬롭의 110%)

Wrong old slope


새로운 보정과 이전의 보정이 일치 하지 않다. 이전의 보정항목을 삭제하고 현재 포인트로 보정을 실행한다. 기계는 현재 보정동안에 확인된 값을 유지 할 것이다.

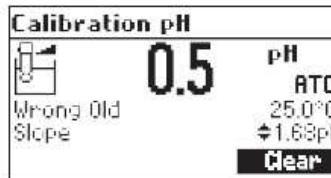

참고 : 1-포인트 보정에 대한 전극상태가 측정스크린에 보이지 않는다.

버퍼가 확정될 때마다 상응하는 버퍼의 이전 보정이 새로운 보정항목으로 교체된다. 현재 보정된 버퍼가 현재 저장된 보정에 일치하는 버퍼가 없고 공간이 비어있다면 현재 버퍼가 추가로 들어갈 것이다.

현재 저장된 보정이 가득 찼다면(5개의 보정 포인트) 보정 포인트 확인 후에 기계는 현재 버퍼로 교체할 것인지 물을 것이다.

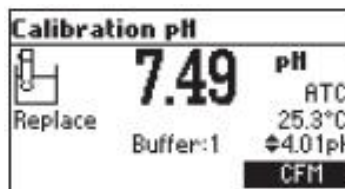

교체할 다른 버퍼를 선택하려면 화살표 키를 누른다.


교체될 버퍼를 확정하려면 CFM을 누른다.

교체모드에서 나가려면 CAL 또는 ESC를 누른다. 이 경우 버퍼는 메모리 되지 않을 것이다.


참고: 교체된 버퍼는 보정리스트에서 제거되지 않고 다음 보정 포인트를 위해 선택될 수 있다.

WORKING WITH CUSTOM BUFFERS

SETUP 메뉴에서 최소 1개 맞춤 버퍼가 설정되었다면, 화살표 키를 눌러 보정을 위해 선택할 수 있다. Custom 기능키가 나타날 것이다.

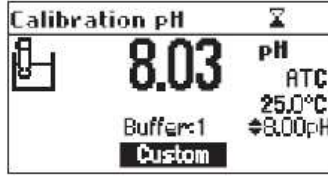


현재 온도에 따라 버퍼값을 조정하길 원한다면 Custom을 누른다.
버퍼값을 변경하려면 화살표 키를 사용한다.

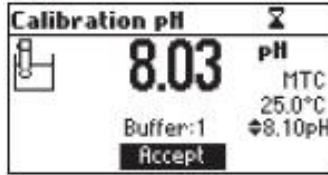


새로운 값을 수락하려면 Accept를 누르거나 변경모드를 나가려면 ESC를 누른다.
참고: Custom 버퍼값은 설정 값 주위의 ±1.00pH 범위 내에서 조절될 수 있다.

WORKING WITH MILI pH BUFFERS

보정이 mili pH 범위에서 나온다면 보정버퍼는 보정버퍼에 label에 따라 ±0.020pH range로 수정할 수 있다.

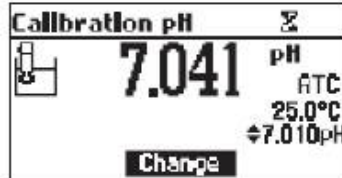

버퍼 조절 모드로 들어가려면 Change를 누른다.
버퍼값을 변경하려면 화살표키를 사용한다.

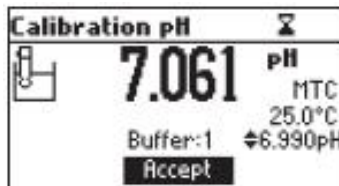

새로운 값을 수락하려면 Accept를 누르거나 조절모드를 나가려면 ESC를 누른다.


CLEAR CALIBRATION

이전 보정들을 삭제하려면 액정에 나타났을 때

Clear 기능키를 누른다.

모든 이전의 보정들을 삭제하고 기계는 보정을 계속한다.


현재 보정에서 확인된 그 포인트들은 유지된다.

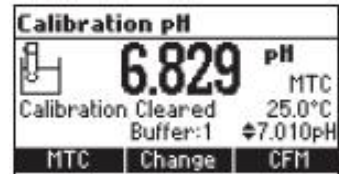

참고: 첫 번째 보정 포인트 동안에 보정 삭제를 한다면, 기계는 측정모드로 돌아간다.

Electrode Condition

보정 후에 전극의 상태를 확인하도록 액정에 아이콘과 수치가 보인다.(기능이 설정되어 있는 경우만)
보정 만료일까지 "condition"이 계속 활성화된다.

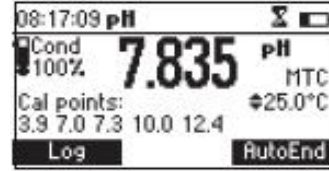

참고: 전극 상태는 오직 현재 보정이 최소 2개의 표준버퍼를 포함할 경우에만 계산된다.

Clean Electrode Warning

pH 보정이 실행될 때마다 기계는 내부적으로 이전의 저장된 것과 새로운 보정이 비교된다. 이 비교가 꽤 차이가 날 경우 pH 전극이 세척이 필요하다고 알리는 "Clean electrode" 경고 메시지가 표시된다. 세척 후에 새로 보정을 한다.



참고: 보정데이터가 삭제되면 기본 값과 비교된다.

pH Buffer 온도차

온도는 pH 값에 영향을 준다. 보정버퍼용액은 일반 용액보다 낮은 값인 온도변화에 의해 영향을 받는다. 보정동안에 기계는 자동적으로 측정된 또는 설정된 온도 값에 상응하는 pH 값으로 보정된다.

TEMP	pH VALUES						
	1.68	4.01	6.86	7.01	9.18	10.01	12.45
0	1.67	4.01	6.98	7.13	9.46	10.32	13.42
5	1.67	4.00	6.95	7.10	9.39	10.24	13.20
10	1.67	4.00	6.92	7.07	9.33	10.18	13.00
15	1.67	4.00	6.90	7.04	9.27	10.12	12.81
20	1.68	4.00	6.88	7.03	9.22	10.06	12.63
25	1.68	4.01	6.86	7.01	9.18	10.01	12.45
30	1.68	4.02	6.85	7.00	9.14	9.96	12.29
35	1.69	4.03	6.84	6.99	9.10	9.92	12.13
40	1.69	4.04	6.84	6.98	9.07	9.88	12.04
45	1.70	4.05	6.83	6.98	9.04	9.85	11.84
50	1.71	4.06	6.83	6.98	9.01	9.82	11.70
55	1.72	4.07	6.84	6.98	8.99	9.79	11.57
60	1.72	4.09	6.84	6.98	8.97	9.77	11.44
65	1.73	4.11	6.85	6.99	8.95	9.76	11.32
70	1.74	4.12	6.85	6.99	8.93	9.75	11.21
75	1.76	4.14	6.86	7.00	8.91	9.74	11.10
80	1.77	4.16	6.86	7.01	8.89	9.73	11.00
85	1.78	4.17	6.87	7.02	8.87	9.74	10.91
90	1.79	4.19	6.88	7.03	8.85	9.75	10.82
95	1.81	4.20	6.89	7.04	8.83	9.76	10.73

보정동안에 기계는 25°C에서 pH 버퍼 값이 보일 것이다.

GLP는 전극의 상태와 유지 관련된 데이터의 저장과 검색을 지원하는 기능이다. pH 보정과 관련된 모든 데이터는 사용자의 필요에 따라 볼 수 있도록 저장된다.

보정만료

마지막 pH 보정이래로 경과된 시간을 관리하기 위하여 기계는 실시간 시계(RTC)가 제공된다. 실시간 시계는 기계가 보정될 때마다 재설정되고 "expired calibration"상태는 기계가 보정 타임아웃이 발견될 때 나타난다. 기계가 재보정되어야 한다는 것을 사용자에게 알리기 위해 "CAL DUE"표시가 깜박이기 시작할 것이다. 보정타임아웃은 1에서 7일까지 또는 Disabled(사용안함)중에서 설정할 수 있다. 예를 들어 4일 타임아웃을 선택했다면 기계는 마지막 보정 후 4일 후에 나타난다. 그러나 만약 언제라도 만료 값이 변경되면(예: 5days) 알람은 즉시 다시 계산되어 마지막 보정 후 5일로 나타날 것이다.

참고: 기계가 보정되지 않았거나 보정이 삭제되었다면(기본값 로그) "expired calibration"이 없고 액정에 "CAL DUE"표시가 깜박일 것이다. RTC에서 예외적인 상태가 발견되면 기계가 "expired calibration"상태로 된다.

마지막 pH 보정 데이터

마지막 pH 보정 데이터는 성공적인 보정 후에 자동적으로 저장된다.

pH 보정 데이터를 보려면 기계가 pH 측정모드에 있을 때 GLP를 누른다.

Last pH cal	Buffer(pH)
Date: 2013/05/31	7.013
Time: 10:03:04	4.01
Cal Expire: Disabled	7.01
Offset: -1.4mV	
Slope: 98.8%	

기계는 보정버퍼, 오프셋, 슬롭, 전극상태를 포함한 많은 데이터를 보여줄 것이다.

참고: Video 전환모드에서 보이는 버퍼는 이전의 보정에 대한 것이다. 맞춤버퍼는 버퍼값의 오른쪽에 "*"로 표시된다. 모든 보정이 삭제되었거나 기계가 pH 측정에서 보정되지 않았다면 "No user calibration"메시지가 보일 것이다.

SETUP

SETUP모드에서는 측정항목을 불러오고 수정할 수 있다. 모든 측정에 대한 일반적인 SETUP 항목과 측정 사양 항목들에 대한 것이다. 다음 표는 일반적인 SETUP 항목들과 유효범위와 기본값이다.

Item	설명	유효값	기본값
Backlight	배경조명 농도	0에서 8	4
Contrast	명암조절	0에서 20	10
Auto Light Off	배경조명 켜져 있는 동안의 시간	1,5,10,30	1
Auto Power off	기계가 꺼진 후의 시간	사용안함, 5,10,30,60	30
Date/Time		01.01.2006에서	현재
		12.31.2099/00:00에서 23:59	날짜/시간
Time Format		AM/PM 또는 24시간	24시간
Date format		DD/MM/YYYY	YYYY/MM/DD
		MM/DD/YYYY	

		YYYY/MM/DD	
		YYYY-MM-DD	
		MonDD,YYYY	
		DD-Mon-YYYY	
		YYYY-Mon-DD	
Language	메시지 언어설정	4개 국어 까지	English
Temperature unit	(HI 98180제외)	°C 또는 °F	°C
Beep ON	신호음 설정	사용함 또는 사용안함	사용안함
Instrument ID	기계 ID	0000 에서 9999	0000
Baud Rate	시리얼 통신	600,1200,1800,9600	9600
Meter Information	액정에 일반적인 정보		


다음 표는 특정 범위 항목이다.

Item	설명	유효값	기본값
Calibr. Time-out	보정경고가 표시된 이후의 일 수	사용안 함, 1에서 7일	사용안 함
First point mode(pH)	1포인트 보정 관리	Replace or offset	Replace
Custom buffer(pH)	Custom buffer 셋팅	최대 5개 버퍼	No
View calibr. points(pH)	보정포인트 보여준다.	Enable 또는 Disable	Enable
Display cut of calibr. range warming		Enable 또는 Disable	Enable

GENERAL PARAMETER SCREENS


배경조명

Backlight 항목에 초점을 맞춘다.

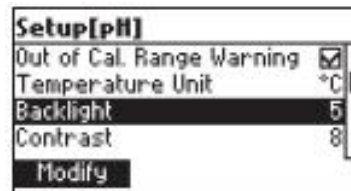


Modify를 누른다.

←/→ 키로 농도를 조절하고 확정하기 위해 Accept를 누른다.
변경하지 않고 나가려면 ESC를 누른다.

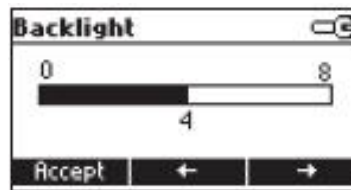


Contrast

Contrast 항목에 초점을 맞춘다.

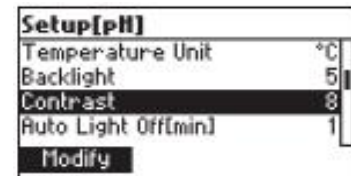

Modify를 누른다.


←/→ 키로 명암을 조절하고 확정하기 위해 Accept를 누른다.
변경하지 않고 나가려면 ESC를 누른다.

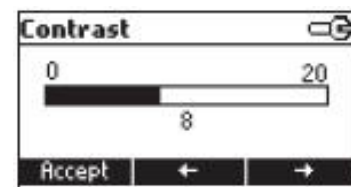

Auto Light Off

Auto Light Off 항목에 초점을 맞춘다.

5, 10, 30중 하나를 골라 설정한다.


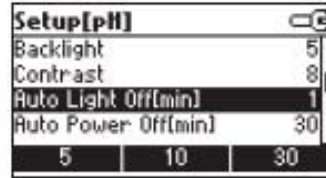


Auto Power Off

Auto Power Off항목에 초점을 맞춘다.

Modify를 누른다.

간격을 선택하려면 화살표를 누르고
Accept를 누른다.
변경하지 않고 나가려면 ESC를 누른다.

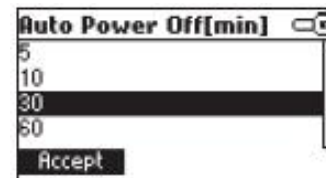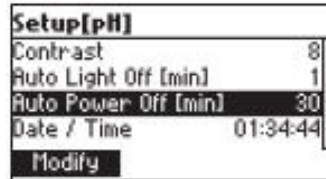


Date/Time

Date/Time항목에 초점을 맞춘다.

Modify를 누른다.


항목선택을 위해 ←/→을 사용한다.
초점 맞춰진 값을 변경하려면 화살표 키를
사용한다.
새로운 세팅을 확정하려면 Accept를 누르고
변경하지 않고 나가려면 ESC를 누른다.

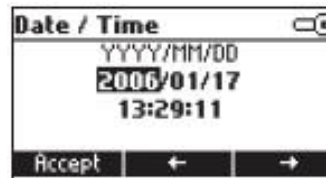

Time Format

Time Format항목에 초점을 맞춘다.


옵션을 변경하려면 기능키를 누른다.

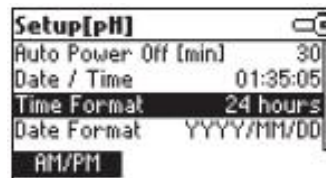


Date Format

Date Format항목에 초점을 맞춘다.

Modify를 누른다.

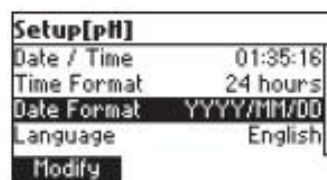

날짜 형식을 선택하려면 화살표키를 사용하고 Accept를 누른다.
 변경하지 않고 나가려면 ESC를 누른다.

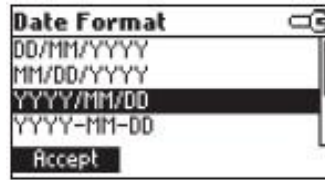

Language

Language 항목에 초점을 맞춘다.




이 옵션을 변경하려면 원하는 기능키를 사용한다. 새로운 언어가 로드될 때까지 기다린다. 만약 언어 로드가 실패되면 기계는 현재 언어로 로드될 것이다. 어떠한 언어로도 로드가 안된다면 기계는 안전모드에서 작동될 것이다. 이 모드에서 모든 메시지가 영어로 보일 것이고 Help 기능을 이용할 수 없다.

Temperature unit

Temperature unit 항목에 초점을 맞춘다.


온도단위를 변경하기 위하여 표시된 기능키를 누른다.

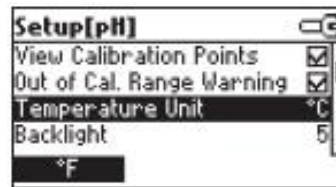

Beep On

Beep On 항목에 초점을 맞춘다.

beep를 사용/불능을 선택하기 위해 표시된 기능키를 누른다.

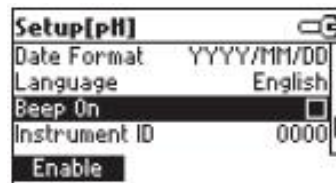


사용가능으로 선택되면 신호음이 키를 누를 때마다 또는 보정이 확정될 수 있을 때 짧게 소리가 난다.

누른 키가 활성화 되지 않거나 보정동안에 잘못된 상황이 발견될 경우 길게 경보음이 난다.


Instrument ID

Instrument ID항목에 초점을 맞춘다.

Modify를 누른다.

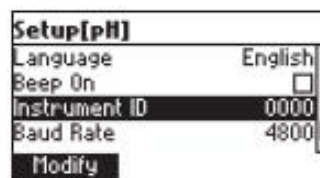


instrument ID를 변경하려면 화살표 키를 사용한다.
 확정하려면 Accept를 누르고 저장하기 않고 나가려면 ESC를 누른다.

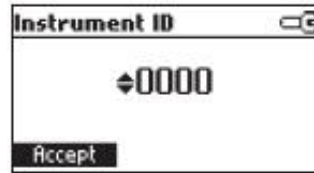


Baud Rate

Baud Rate항목에 초점을 맞춘다.

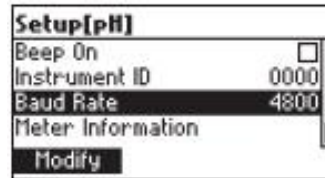


Modify를 누른다.

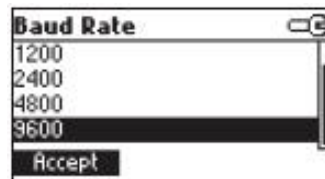

원하는 통신보드를 선택하려면 화살표 키를 사용한다.
 확정하려면 Accept를 누르고 나가려면 ESC를 누른다.


Meter Information

Meter Information항목에 초점을 맞춘다.

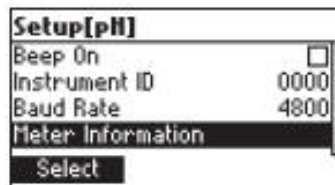

Select를 누른다.


- firmware version
- language version
- mV 와 온도 공장보정 시간/날짜
- 배터리 잔량

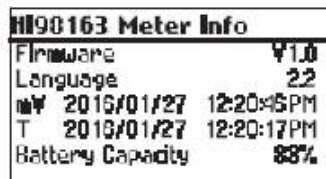


RANGE SPECIFIC PARAMETERS SCREENS

Calibration Timeout

Calibration Timeout 항목에 초점을 맞춘다.

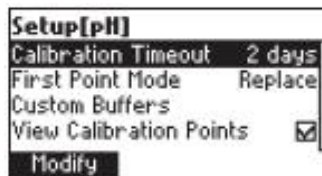


Modify를 누른다.

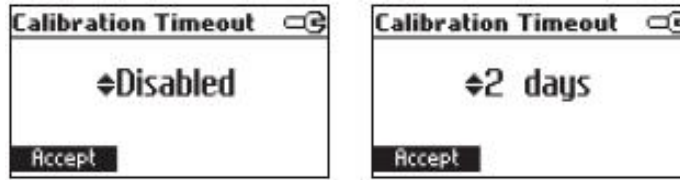

원하는 값을 설정하려면 화살표키를 사용한다.
 확정하려면 Accept를 누르고 저장하기 않고 나가려면 ESC를 누른다.
 참고: 보정 후 설정해둔 일수가 경과되면, "CAL DUE"가 표시될 것이다.

First point mode

First point항목에 초점을 맞춘다.

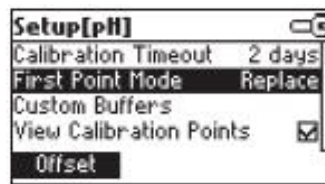


이 옵션을 변경하기 위하여 표시된 기능키를 누른다.
 First point모드는 "One Point calibration"에 따른 기계의 반응으로 참고한다.
 Offset이 설정되면 1-포인트 보정 후에 기계는 오프셋이 평가되고 변경되지 않은 슬롯을 유지한다.


Custom Buffers

Custom Buffers 항목에 초점을 맞춘다.


Modify를 누른다.

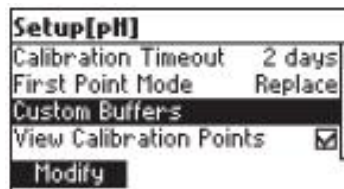


초점된 버퍼를 삭제하려면
 Delete를 누른다.

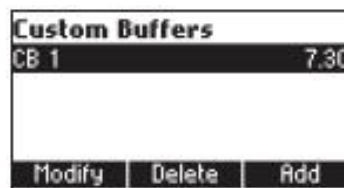

리스트에 새로운 버퍼를 추가하려면
 Add를 누른다.(최대 5개)
 맞춤 버퍼값을 설정하려면
 Modify를 누른다.

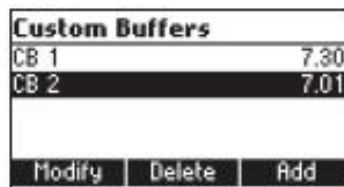


값을 변경하려면 화살표 키를 사용한다.

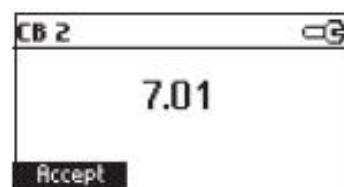

맞춤 버퍼값을 확정하려면 Accept를 누르고 저장하지 않고 나가려면 ESC를 누른다.

View Calibration Points

Calibration Point 항목에 초점을 맞춘다.

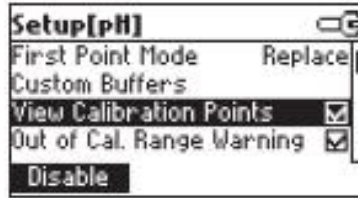


옵션을 변경하려면 표시된 기능을 누른다.

옵션이 사용가능으로 설정되면 마지막 보정과 상응하는 보정버퍼가 pH 측정 화면에 보일 것이다.

Out of Cal-Range Warning

Out of Cal-Range Warning 항목에 초점을 맞춘다.

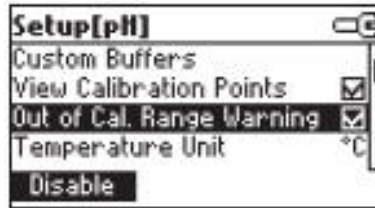

옵션을 변경하려면 표시된 기능을 누른다.

ph 측정 범위 바깥이라면 "Out Cal Range"가 표시될 것이다.


교정에 사용된 최저, 최고 pH버퍼 값에서 대략 1pH 단위로, ph 7.01 1포인트 보정이라면 이 메시지는 ph값이 4보다 낮거나, 10보다 높을 때 나타난다.

LOGGING

이 기기는 사용자에게 pH 측정 기록을 제공합니다. 모든 저장된 데이터는 USB와 프로그램 (HI92000)을 이용해서 컴퓨터로 옮길 수 있습니다. 기기 내에는 최대 200(pH 100, mV 100) 개의 정보를 저장할 수 있습니다.


LOGGING THE CURRENT DATA(현재 데이터 저장하기)

현재 기록을 메모리에 저장하려면 측정모드에서 LOG를 누른다.

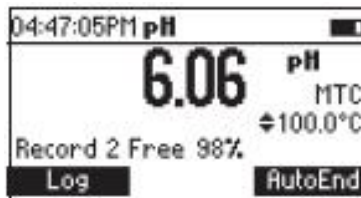

잠시 동안 레코드 번호와 남은 공간이 표시될 것이다.

LOG 공간이 가득차면 로그키가 나타났을 때 "Log Space is full"메시지가 잠시 동안 나타날 것이다. View Logged Data Mode로 들어가서 지난 기록들을 삭제한다.

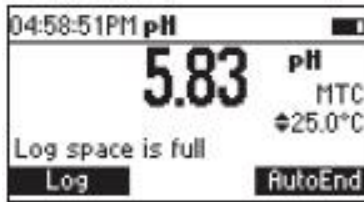

VIEW LOGGED DATA


특정 범위에 대한 측정모드에서 저장된 정보를 불러오려면 RCL을 누른다.
기록의 리스트가 보인다.

	pH	Date
1	6.06	2006/01/18
2	6.06	2006/01/18
3	6.06	2006/01/18
4	6.06	2006/01/18

Delete All Delete More

저장된 데이터가 없으면 "No Record"메시지가 보일 것이다.
리스트의 기록들을 보려면 화살표 키를 사용한다.
Delete All 화면으로 들어가려면 Delete All을 누른다.
Delete record 화면으로 들어가려면 Delete를 누른다.
초점 맞춰진 레코드의 정보를 더 보려면 More를 누른다.

More를 누른 경우

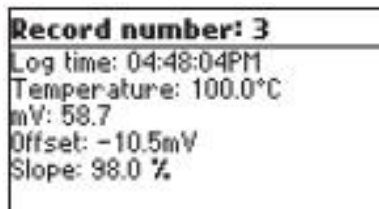

로그 정보를 이동하려면 화살표 키를 사용한다.
Delete를 누르면.

Delete Record?


1	6.06	2006/01/18
2	6.06	2006/01/18
3	6.06	2006/01/18
4	6.06	2006/01/18

CFM

삭제할 레코드에 초점 맞추려면 화살표 키를 사용하고 CFM을 누른다.
나가려면 ESC를 누른다.
Delete All을 누르면 기계는 확인을 요청한다.
확정하려면 CFM을 누르고 삭제하지 않고 나가려면 ESC를 누른다.


Auto End

첫 번째 안정된 기록을 LCD에 고정하려면 측정모드에서 **AutoEnd**를 누른다.

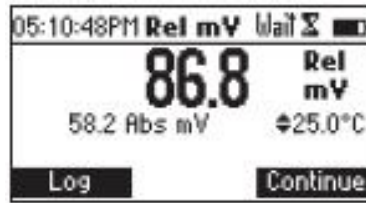

기록이 안정될 때까지 "Wait"문자가 깜박일 것이다.

기록이 안정되면 "Hold"아이콘이 나타날 것이다.

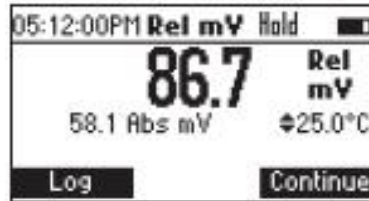

continuous reading mode (기록모드 계속하기)로 들어가려면 Continue를 누른다.

LCD에 뜬 첫 번째 측정값을 고정시키기 위해서 측정 모드 동안에 AutoEnd를 누른다.

"Wait"표시가 측정이 안정될 때까지 깜박일 것이다.

측정이 안정되면 "Hold" 표시가 나타날 것이다. 측정 모드를 계속하려면 Continue를 누른다.

mV와 Temperature calibration(기술전문가만 가능)

모든 기기는 공장에서 mV와 온도를 보정해서 나옵니다. 한나 기계의 온도 센서는 교환가능하며 교체될 때 별도의 온도 보정이 필요하지 않습니다. 만약 온도가 부정확하다면 보정이 필요합니다. 정확한 재보정을 위해서 지역 한나 기계 사무소에 연락하거나, 다음의 설명을 따릅니다.


보정모드로 들어가기

기계를 끄고 ▲/▼ 버튼을 누르고 있다가 전원을 켜다. 보정화면이 보인다. 온도 보정모드로 들어가려면 "T"기능키를 누른다.




온도 보정


- 얼음과 물이 들어있는 용기와 뜨거운 물(대략 50°C)이 들어있는 용기를 준비한다. 온도 변화를 최소화하기 위해 용기주변에 절연물질을 둔다.
- 레퍼런스 온도계로 최소측정단위가 0.1°C인 보정된 온도계를 사용한다. 온도프로브를 적절한 소켓에 연결한다.

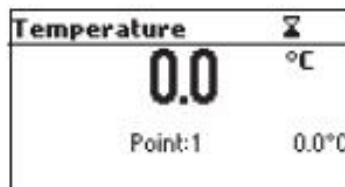


- 온도프로브 또는 온도 센서가 내장된 pH 프로브를 얼음물이 담긴 용기에 담근다. 프로브가 안정되도록 기다린다.
- 얼음물의 보정포인트 값을 설정하기 위해 화살표 키를 사용한다. 기록이 안정되고 선택된 보정 포인트와 가까우면 CFM 기능키가 나타난다.
- 확정하려면 CFM을 누른다.
- 두 번째 예상된 보정포인트가 보인다.

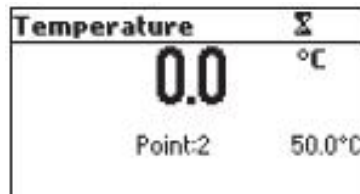

- 온도프로브를 두 번째 용기에 담근다. 프로브가 안정되도록 기다린다.

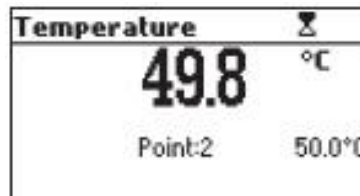

- 뜨거운 물의 값으로 보정 포인트 값 설정하려면 화살표 키를 누른다.
- 기록이 안정되고 선택된 보정 포인트와 가까우면 CFM 기능키가 보인다.

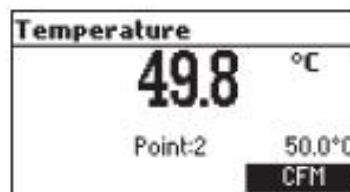

- 확정하려면 CFM을 누른다. 측정모드로 돌아간다.

참고: 그 포인트와 가까운 보정 포인트($\pm 10.0^{\circ}\text{C}$)를 변경하기 위해 화살표 키를 누른다.

기록이 선택된 보정 포인트와 가깝지 않으면 "Wrong" 메시지가 깜박일 것이다. 온도 프로브를 변경하고 보정을 다시 시작한다.

PC 연결

소프트웨어 HI 92000 Windows[®](옵션)로 PC에 연결하여 기계로부터 데이터를 전송할 수 있다. HI 92000은 또한 그래프와 온라인 도움말 기능을 제공한다.


데이터는 가장 대중적인 스프레드시트 프로그램으로 만들어진다.

PC에 연결하려면 USB 케이블 커넥터를 사용한다. 기계 전원이 꺼졌는지 확인하고 USB 소켓에 커넥터 한쪽을 연결하고 다른 한쪽을 사용자 PC 시리얼 또는 USB포트에 꽂는다.

배터리 충전/ 교체

이 기계는 충전 가능한 배터리가 들어있다.

먼저 기계 작동을 시작하거나 새로운 것으로 배터리를 변경하였을 때 다음 과정을 실행한다. :

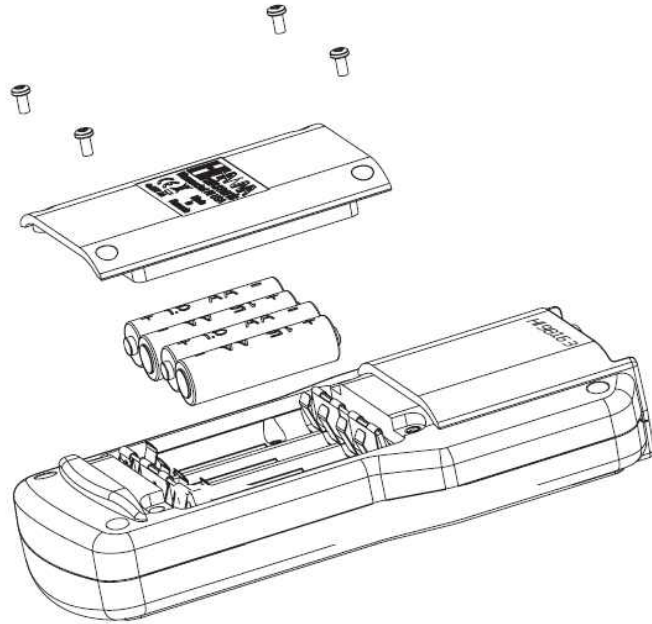


- ◆ 기기를 끈다.
- ◆ 4개의 나사를 풀어서 기기의 후면과 앞면의 배터리 삽입부를 개봉한다.
- ◆ 사용한 배터리를 분리한다.
- ◆ 4개의 1.5V AA건전지를 양극을 올바르게 맞춰 배터리 삽입부에 배터리를 넣는다.
- ◆ 4개의 나사를 조여 배터리 삽입부를 닫는다.

만약 배터리의 잔량이 20% 미만이라면 지속적인 응답과 화면 불빛이 불가능하다.

참고 : 이 기기는 배터리 잔량이 매우 낮아 제대로 된 측정이 불가능할 때 자동적으로 기기를 종료하는 BEPS(배터리 오류 방지 시스템) 기능을 가지고 있다.

TEMPERATURE CORRELATION FOR PH SENSITIVE GLASS

유리전극의 방해는 부분적으로 온도에 영향을 받는다. 온도가 낮으면 낮을수록 저항력은 커 집니다. 만약에 저항력이 크다면 기록이 안정되기 위한 시간은 더 많이 걸릴 것입니다. 반응 시간은 25°C 아래 온도에서 더 많이 걸릴 것이다.

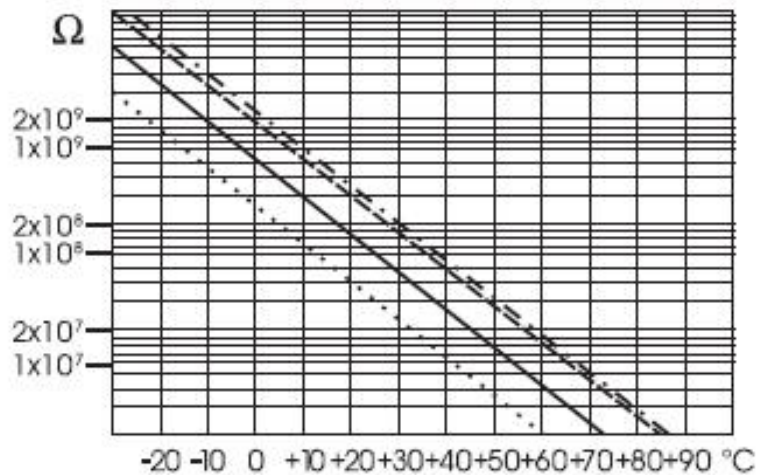

pH전극 저항력이 50-200 Mohm 측정범위 안에 있으므로, 멤브레인을 가로질러 흐르는 전류는 피코 암페어 범위 안에 있다. 많은 시간동안 많은 전류가 흐르면 전극 보정에 방해를 줄 수 있다.

습기가 많은 환경, 짧은 회로, 정전기의 방전 등의 이유들이 pH 기록이 안정되는데 불리하게 작용한다.

pH전극의 수명은 온도에 달려있다. 만약 계속해서 높은 온도를 사용하면 전극 수명은 많이 줄어들 것이다.

보통 전극 수명

대기 온도	1-3년
90°C	4 달 이하
120°C	1 달 이하


Alkaline Error

나트륨 이온의 높은 집중은 알칼리 용액 기록에 방해로 준다. pH를 방해하는 데는 유리의 구성이 상당한 영향을 미친다. 그 방해로 알칼리 에러라고 부르고 pH를 무시하게 되는 원인이다. Hanna의 유리 공식화는 아래 표와 같은 특징을 가지고 있다.

Sodium Ion Correction for the Glass at 20-25°C		
Concentration	pH	Error
0.1 Mol L-1Na+	13.00	0.10
	13.50	0.14
	14.00	0.20

1.0 Mol L-1Na+	12.50	0.10
	13.00	0.18
	13.50	0.29
	14.00	0.40

ELECTRODE CONDITIONING(전극 상태)

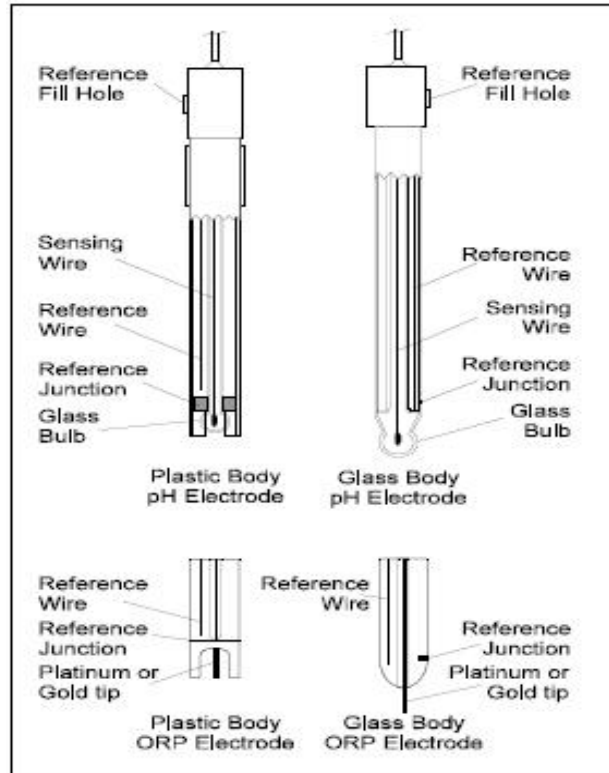

PREPARATION(준비물)

보호캡을 벗긴다.

염분 침전물이 생겼더라도 염려하지 마십시오. 이것은 정상적인 일이며 침전물은 물로 행구면 없어집니다. 운송도중에 전극의 알맞은 기능을 하는데 영향을 미치는 유리구 안에 작은 공기방울이 생길지도 모릅니다. 여러분이 유리 온도계를 이용하는 것처럼, 전극을 아래로 흔들어서 이 방울들을 제거할 수 있습니다.

만약 구나 정선이 건조할 경우 전극을 보존용액인 HI70300이나 HI80300에 최소 한 시간 정도 담가둡니다.

FOR REFILLABLE ELECTRODES(충전 가능한 전극):

채워진 홀 아래로 전해질용액을 홀 아래 2½ cm(1")이상 채우실 경우 더블 정선을 위한 HI7082나 HI8082 3.5M KCL 전해질을 추가하거나 싱글 정선을 위한 HI7071이나 HI8071 3.5M KCL 전해질을 추가한다.

빠른 반응을 위해서는 측정동안에 채워진 홀의 나사를 풀어놓는다.

MEASUREMENT(측정)

전극 끝을 증류수로 헹굽니다.

전극 끝을 샘플에 담그고(밑에서 약4cm/1½ ") 2초 동안 서서히 젖는다.

빠른 반응을 위해 그리고 샘플들이 서로 섞이는 것을 피하기 위해서는 측정하기 전에 테스트하려는 용액의 몇 방울 떨어뜨려 전극 끝을 헹군다.

STORAGE(저장)

방해를 최소화하고 빠른 시간에 반응을 확인하기 위해서 유리 온도계와 정선을 축축하게 유지해야하므로 마르도록 두지 않는다.

HI70300 이나 HI80300보존용액을 몇 방울 떨어뜨려서 보호캡 안의 용액을 교체하거나 그것이 없으면 용액(싱글 정선을 위한 HI7071 이나 HI8071이나 더블 정선 전극을 위한 HI7082 이나 8082)으로 채운다. 측정하기 전에 103페이지에 준비과정을 따라한다.

참고: 전극을 증류한 곳이나 증류수에 보관하지 않는다.

PERIODIC MAINTENANCE(주기적인 관리)

전극과 케이블을 자세히 살피도록 한다. 기기에 연결할 때 사용될 케이블은 손상되지 않아야만 하고 케이블에 절연체에 깨진 부분이 없어야하고 전극 대나 유리에 조금이라도 깨진 부분이 없어야만 한다. 커넥터는 절대로 깨끗하고 마른상태여야 한다. 만약에 흠집이나 깨진 부분이 있다면 전극을 교체한다. 어떠한 염류 침전물이라도 물로 헹궈낸다.

pH 프로브관리

FOR REFILLABLE ELECTRODES(충전 가능한 전극):

신선한 전해질(싱글 정선을 위한 HI7071이나 HI8071 이나 더블 정선을 위한 HI7082이나 HI8082)과 함께 레퍼런스(reference)공간에 채운다. 한 시간 동안 전극을 똑바로 세워놓는다. 위의 보존과정을 따라한다.

pH CLEANING PROCEDURE(청소 과정)

- ◆ 일반- 30분 정도 Hanna 제품 HI7061이나 HI8061 세척용액에 담근다.
- ◆ 단백질- 15분 정도 Hanna 제품 HI7073이나 HI8073 세척용액에 담근다.
- ◆ 무기물- 15분 정도 Hanna 제품 HI7074나 세척용액에 담근다.
- ◆ 오일/윤활유(grease)- Hanna 제품 HI7077이나 HI8077 오일에 헹구고 Fat Cleaning Solution으로 헹군다.

Instruction for Application Cleaning Solution(세척 과정)

1. 비커에 50-75ml(또는 최소한 전극의 정선을 덮을 수 있는 정도의 양)의 다음과 같은 용액을 붓는다.

- 세척& 소독용액(유제품용) HI 70641
- 세척& 소독용액(요거트용) HI 70643
- 산성 세척 용액(고기, 윤활유, 지방 용) HI 70630

- 알카리성 세척 용액(고기, 윤활유, 지방 용) HI 70631
 - 세척용액(치즈 침전물용) HI 70642
 - 세척용액(우유 침전물용) HI 70640
2. 5~15분간 전극을 용액에 담가 천천히 젖는다.
 3. 전극을 용액에서 빼내서 증류수에 세척 용액이 남지 않도록 전부 헹궈낸다.
 4. 선택적으로 세척을 끝낸 전극을 전해질 용액에 1시간 정도 보관한다.
 5. 세척한 전극을 증류수에 헹구고 평소와 같이 샘플을 측정한다.

참고 : 만약 전극의 반응이 느리거나 전극이 보정이 부정하다면 위의 세척 방법을 반복한다.

중요사항 : 어떠한 세척과정을 한 후에는 전극을 전체적으로 증류수로 헹군다.

레퍼런스 통에 새로운 전해질과 함께 (젤이 채워진 전극을 위해 필요 없음.) 재충전한다. 그리고 측정하기 전에 최소한 1시간동안 보존용액 HI 70300이나 HI80300에 담가둔다.

증상	문제	해결방법
늦은 반응/과도한 경향	더러운 pH전극	HI 7061 용액에 30분간 담군 후 세척과정을 진행한다.
측정이 위아래로 흔들린다. (노이즈 발생)	정선의 막힘/더러움 낮은 전해질 수위(리필 가능한 전극만)	전극을 세척한다. 새로운 전해질 용액으로 전극을 다시 채운다(리필 가능한 전극만)
전체 화면이 깜박일 때	측정 범위 밖에서 측정	측정 샘플을 측정 가능한 범위로
"Clean electrode" 메시지가 깜빡임	탐지된 예전 보정과 현재 보정이 다름	전극을 세척하고 재보정한다. 문제가 지속되면 버퍼 용액을 확인한다.
보정에 실패하거나 잘못된 값을 나타냄	전극 깨짐	전극을 교체한다.
pH 보정 과정 중 에러 메시지 표시	잘못되거나 오염된 버퍼 용액, 더럽거나 깨진 전극	버퍼 용액을 확인한다.
기기의 꺼짐	배터리 잔량 없음 : 자동 꺼짐 기능 켜둘 시, 일정 시간 사용하지 않으면 꺼짐	배터리 교환:on/off키를 누름
시작할 때 "Errxx" 메시지	내부 오류	HANNA 사무소에 연락
기계가 on/off 키를 눌러도 안 켜질 때	초기화 오류	on/off키를 20초간 눌러보거나 배터리를 다시 끼워본다.